

INFORMATIONEN ZUR ALLGEMEINEN PRODUKTSICHERHEIT (GPSR)

Produktbezeichnung:

Produktgruppe:

Wartner® Warzenvereisung Fuß

Medizinprodukt

Artikel-EAN:

4250752205765

PZN:

4997906

Artikelnummer:

5000013955

Vertrieb:

Perrigo Deutschland GmbH

Königstraße 26

70173 Stuttgart

Kontakt:

[BCHDEkontakt@perrigo.com](mailto: BCHDEkontakt@perrigo.com)








Gegen Fußwarzen

Wartner® basiert auf der gleichen Vereisungsmethode, die auch Ärzte anwenden. Mit Wartner® können Sie Warzen effektiv und schnell entfernen. Wartner® vereist die Warze mit meist nur 1 Anwendung, dadurch fällt sie in der Regel innerhalb von 10 - 14 Tagen ab. Unter der Warze hat sich während dieser Zeit bereits neue, gesunde Haut gebildet.


Falls eine Warze (oder ein Teil einer Warze) zwei Wochen nach der Behandlung immer noch vorhanden ist, können Sie Wartner® bedenkenlos ein 2. oder 3. Mal erneut anwenden. Falls Sie eine Warze mit einem Durchmesser von mehr als 7,5 mm entfernen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Eine Packung Wartner® ermöglicht 12 Vereisungen.

Einfache Anwendung in 6 Schritten

1. Weichen Sie die Fußhaut 5 min lang in warmem Wasser auf und entfernen Sie die Hornhaut anschließend mit der beiliegenden Feile, um die Warze freizulegen
2. Setzen Sie den Schaumstoffapplikator auf den Plastikhalter
3. Drücken Sie den Halter mit dem Applikator für **3 Sekunden** in die Dose
4. Um eine kältere und damit effektivere Vereisungstemperatur zu erreichen, warten Sie bitte **20 Sekunden**, nachdem Sie den Halter mit dem Applikator aus der Dose entnommen haben
5. Setzen Sie die weiße Spitze des Schaumstoffapplikators für **40 Sekunden** auf die Warze
6. Bringen Sie ein Komfortpflaster auf der behandelten Warze an

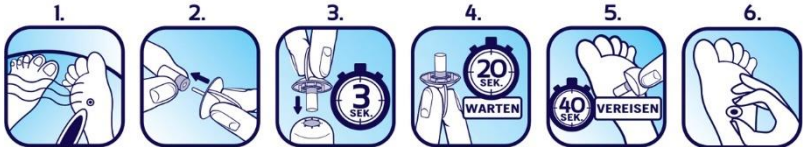



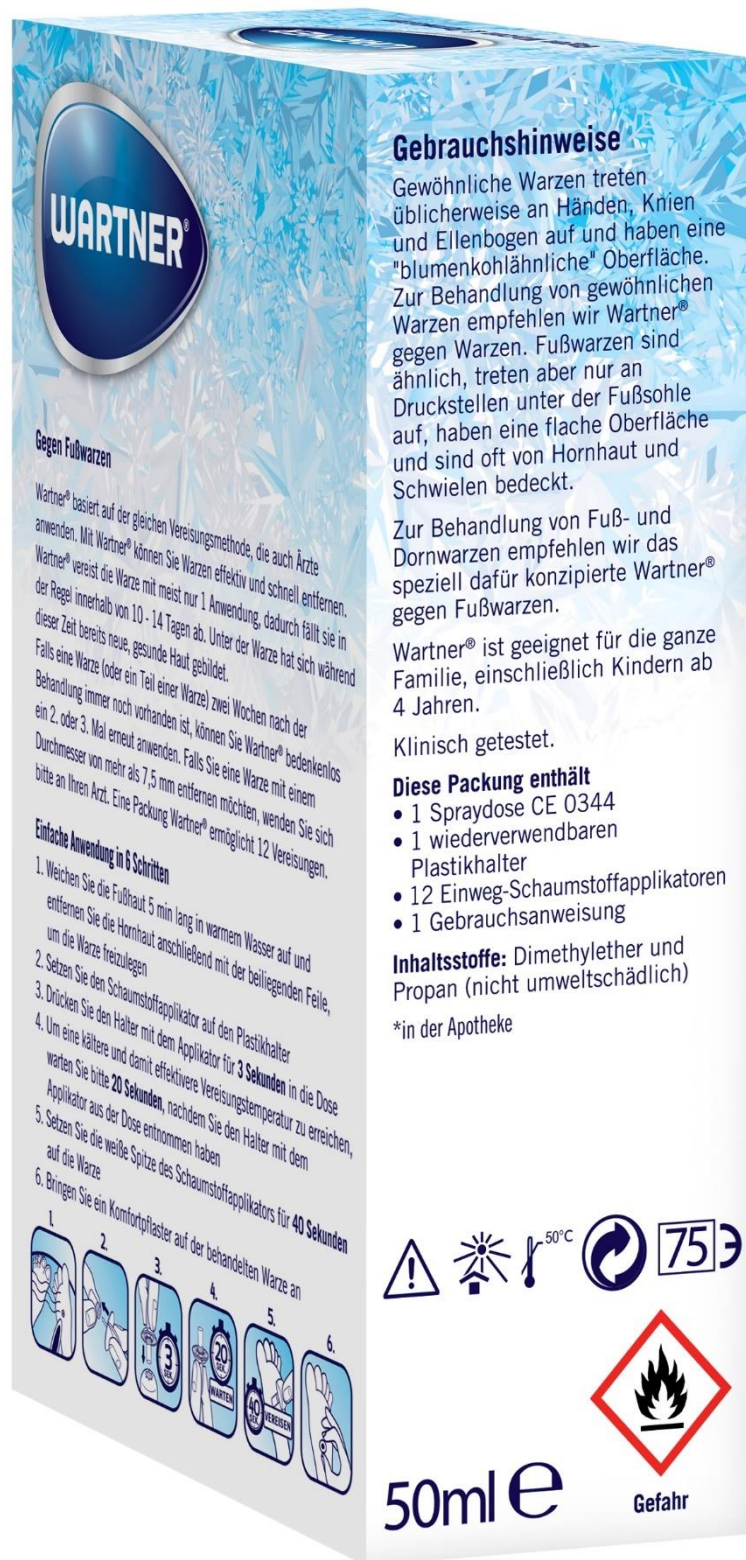



BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON WARTNER® DIE AUSFÜHRUNGSINFORMATIONEN IN DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH.

A. Wie funktioniert Wartner® gegen Warzen?

Wartner® verwendet die gleiche Technik, die auch Ärzte anwenden: Die Vereisung.

1. Wartner® vereist die Warze sofort bis zur Wurzel. Wenn Sie den Schaumstoffapplikator auf die Warze drücken, verfärbt sich diese weiß und es entsteht ein leicht schmerzhaftes, stichendes Gefühl als Folge der Vereisung. Nach dem Entfernen des Applikators nimmt die Haut nach und nach wieder ihre natürliche Farbe an. Das schmerzhaft, stichende Gefühl wird ebenfalls schnell nachlassen und innerhalb weniger Stunden verschwinden.
2. Nachdem die Hautstelle wieder "aufgetaut" ist und ihre ursprüngliche Farbe zurückgewonnen hat, kann eine Rötung von der Größe der vereisten Fläche auftreten. Die Vereisung kann innerhalb weniger Tage auch zur Entstehung einer Blase unter der Warze führen. Diese ist unter Umständen für das bloße Auge nicht zu erkennen. Die vereiste Warze sollte in den darauffolgenden Tagen verschwinden oder innerhalb von 10 bis 14 Tagen abfallen. Unter der Warze hat sich während dieser Zeit bereits neue, gesunde Haut gebildet.



B. Nebenwirkungen:

- Wie bei allen Vereisungsmethoden kann sich die Haut vorübergehend weiß verfärben.
- Es ist wichtig, dass das Produkt vorschriftsmäßig angewandt wird, da eine übermäßige Einwirkung des Vereisungsproduktes zu einer Schädigung der obersten Hautschichten und damit zu Narben und/oder Nervenschäden führen kann.
- Wenn tödlich gesundes Gewebe an den Zehen mit dem Produkt in Kontakt kommt (was durch eine längere Vereisung als angegeben vorkommen kann), kann dies zu einem lokalen Absterben des Gewebes führen.
- In seltenen Fällen kann sich eine größere Blase bilden, die unter Umständen schmerzhaft sein kann.
- Nach dem Abfallen der Warze kann es zu Pigmentverlusten und eventuell zu kleinen Narben kommen.
- Durch die Verwendung von Wartner® kann es aufgrund der niedrigen Vereisungstemperatur zu leichten Verbrennungen kommen, über die zwar berichtet wurde, die aber relativ selten aufgetreten sind.
- Wartner® sollte unbedingt entsprechend dieser Gebrauchsanweisung angewandt werden, um das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren.

C. In bestimmten Fällen sollten Sie Wartner® nicht anwenden:

Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind, ob es sich um eine Warze handelt, konsultieren Sie vor der Anwendung von Wartner® zuerst einen Arzt.

Wartner® ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren, sollte aber nur von Erwachsenen angewandt werden. Wartner® darf nicht von Schwangeren oder Stillenden angewandt werden. Falls Sie Diabetiker sind, sollten Sie Wartner® nicht anwenden, da das vereiste Gewebe sehr langsam oder nicht vollständig verheilen kann. Personen mit schlechter Durchblutung sollten vor der Anwendung von Wartner® Rücksprache mit ihrem Arzt halten.

Das vorliegende Wartner® Produkt ist für die Anwendung an Füßen bestimmt. Nicht auf empfindlicher oder dünner Haut (wie zum Beispiel Gesicht, Hals, Achselhöhlen, Brust, Gesäß oder Genitalien) anwenden. Nicht auf gereizter Haut oder an Stellen anwenden, die infiziert oder gerötet sind oder Anzeichen von Entzündungen wie Juckreiz oder Schwellungen aufweisen. Verwenden Sie das Produkt nicht auf Warzen, aus denen Haare wachsen, auf Muttermalen, dunklen Muttermalen, pigmentierter Haut oder anderen ungewöhnlich aussehenden Hautveränderungen. **Nicht zur Behandlung von Dehwarzen geeignet.**

D. Vorsichtsmaßnahmen:

- Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze handelt, konsultieren Sie einen Arzt.
 - Nur zur äußerlichen Anwendung; nicht schlucken oder einatmen und nur in gut belüfteten Räumen anwenden.
 - Waschen Sie sich unmittelbar nach der Anwendung die Hände (außer an der behandelten Stelle).
 - Benutzen Sie Wartner® nur zusammen mit den beigefügten Schaumstoffapplikatoren.
 - Benutzen Sie für jede Warze einen neuen Schaumstoffapplikator und benutzen Sie jeden Applikator nur einmal.
 - Vermeiden Sie den Kontakt mit der gesunden Haut, die die Warze umgibt. Diese kann z. B. mit Vaseline oder einer fetthaltigen Salbe geschützt werden.
 - Üben Sie während der Vereisung keinen übermäßigen Druck auf den Applikator aus.
 - Tupfen Sie das umliegende Gewebe der Warze nicht ab.
 - Der Applikator sollte nicht länger als 40 Sekunden auf der Warze verbleiben. Sollte sich die umliegende Haut vorher weiß verfärben, entfernen Sie den Applikator von der Haut.
 - Wenn mehrere Warzen auf dem Fuß oder den Zehen dicht beieinander liegen, darf immer nur jeweils eine Warze behandelt werden. Die übrigen Warzen sind einzeln im Abstand von 2 Wochen zu behandeln.
 - Alte und große Warzen lassen sich mitunter nur schwer entfernen, daher ist in diesem Fall oftmals mehr als eine Anwendung mit Wartner® erforderlich.
 - Falls mehr als eine Anwendung nötig sein sollte, wiederholen Sie die Behandlung nach 2 Wochen. Insgesamt darf die Warze nicht mehr als 3-mal mit Wartner® behandelt werden. Wenn nach 3 Behandlungen noch kein Ergebnis erzielt wurde, konsultieren Sie Ihren Arzt.
 - Das Verfalldatum und die Chargennummer finden Sie auf der Verpackung und auf dem Boden der Spraydose.
 - **GEFÄHR:** Wartner® enthält extrem leicht entzündliche Inhaltsstoffe. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen.
 - Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung bersten.
 - Die Spraydose nicht aufbrechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Wenden Sie dieses Produkt in einem gut belüfteten Raum an und halten Sie mindestens 1 m Abstand zu Feuer, glühendem Material, Zündquellen, einschließlich Lichtern. Nicht in der Nähe rauchen oder in die Nähe von glühenden Zigaretten halten.
 - Bewahren Sie Wartner® an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Nur vollständig entleerte Spraydosen in den Hausmüll geben. Nicht vollständig entleerte Spraydosen gesondert entsorgen.
 - Vermeiden Sie übermäßiges Feilen der Warze, da dies zu leichten Blutergüssen oder Blutungen führen kann.
 - Geben Sie die verwendete Folie nicht an andere Personen weiter, da Warzen sehr ansteckend sind.
 - Sollte Ihnen eine Allergie gegenüber Acrylate bekannt sein, sollten Sie die Komfortpflaster nicht verwenden. Im Falle von Hautirritationen sollte die Verwendung ebenfalls eingestellt werden.
- E. Eine Packung Wartner® enthält:**
- 1 Spraydose mit einem Gemisch aus Dimethylether und Propan, welches nicht umweltschädlich ist. CE 0344
 - 1 wiederverwendbaren Plastikhalter für die Schaumstoffapplikatoren.
 - 12 Einweg-Schaumstoffapplikatoren für je eine Behandlung
 - 1 wiederverwendbare Hornhauffolie
 - 12 Komfortpflaster
- Diese Gebrauchsanweisung mit ausführlichen Informationen über Wartner®, wie es funktioniert und erfolgreich eingesetzt werden kann, um Fuß- bzw. Dornwarzen zu entfernen.

F. Gebrauchsanweisung:

Bitte lesen Sie vor der Anwendung die ausführlichen Informationen in dieser Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig durch. 10-14 Tage nach der Behandlung mit Wartner® sind die Warzen normalerweise verschwunden. Alte und große Warzen benötigen mitunter mehr als eine Behandlung. Ist die Warze oder ein Teil davon nach 14 Tagen noch vorhanden, kann die Behandlung mit Wartner® bedenkenlos wiederholt werden. Verwenden Sie für jede Behandlung einen neuen Applikator und entsorgen Sie ihn nach der Behandlung. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn nach 3 Behandlungen noch keine Besserung eingetreten ist.

Omega Pharma International NV, Venecoweg 26,
 9810 Nazareth, Belgien
 Vertrieb: Perrigo Deutschland GmbH, Königstraße 26,
 DE-70173 Stuttgart
 Besuchen Sie uns im Internet: www.wartner-warzen.de

Stand der Informationen: Februar 2022
 59-34093-0447 / LF139550



EINFACHE ANWENDUNG IN 6 SCHRITTEN

VOR DER ANWENDUNG

Tauchen Sie den Fuß mit der Warze für 5 Minuten in warmes Wasser und bearbeiten Sie anschließend die Hornhaut mit der beigefügten Hornhauffolie, um die Warze freizulegen.



SCHRITT 1

Nehmen Sie den Schaumstoffapplikator an der blauen Seite zwischen Daumen und Zeigefinger und drücken Sie darauf, bis eine kleine Öffnung sichtbar wird. Schieben Sie nun die Öffnung des Schaumstoffapplikators über den Stift des Plastikhalters, bis der Stift nicht mehr sichtbar ist.



SCHRITT 2

Halten Sie die Spraydose vorzugsweise in einer aufrechten Position mit einem Abstand zu Ihrem Körper. Achten Sie darauf, dass sich die Spraydose nicht in der Nähe von glühenden Flammen und jeglichen offeneren Quellen befindet. Vermeiden Sie außerdem Hitze und direktes Sonneneinstrahlung. Stecken Sie den Plastikhalter mit dem Schaumstoffapplikator in die Öffnung auf der Deckelebene, so dass der Schaumstoffapplikator nicht mehr sichtbar ist. Halten Sie die Dose mit einer Hand gut an der Unterseite fest, während Sie den Halter 3 Sekunden lang (ziehen Sie von 21 bis 23) mit der anderen Hand fest in die Dose drücken. Sie hören währenddessen ein zischendes Geräusch. Ziehen Sie anschließend den Halter mit dem Schaumstoffapplikator aus dem Ventil. Der Schaumstoffapplikator hat sich jetzt mit kalter Flüssigkeit vollgesaugt und es entsteht ein Kondensat. Dieses Kondensat ist unschädlich.



SCHRITT 3

Um eine kältere und damit effektivere Vereisungstemperatur zu erreichen, warten Sie bitte 20 Sekunden, nachdem Sie den Halter mit dem Applikator aus der Dose entnommen haben.



SCHRITT 4 UND 5

Nachdem Sie die 20 Sekunden abgewartet haben, drücken Sie den Plastikhalter mit der weißen Spitze des Schaumstoffapplikators für 40 Sekunden leicht auf die Fußwarze. Stellen Sie dabei einen anhaltenden Kontakt mit der zu behandelnden Stelle sicher. Sie sollten den Schaumstoffapplikator für die notwendige Zeit auf die Warze drücken. Aufgrund der Vereisung wird ein leicht schmerzhaftes, stichendes Gefühl entstehen. Warten Sie nach der Behandlung 2 Minuten, bevor Sie den Schaumstoffapplikator mit einem beschrifteten vom Plastikhalter abziehen. Werfen Sie den Schaumstoffapplikator nach einmaliger Verwendung weg. Verwenden Sie den Schaumstoffapplikator nicht wieder und berühren Sie seine Spitze auch nicht mit bloßen Händen, um eine Neuanheftung zu vermeiden.



SCHRITT 6

Nach der Anwendung können Sie ein unangenehmes Gefühl verspüren, wenn Druck oder Reibung auf die behandelte Stelle ausgeübt wird. Daher können Sie mit einem Komfortpflaster den empfindlichen Bereich schützen. Bringen Sie das Pflaster mit der klebenden Seite so auf der Haut an, dass sich das Loch in der Mitte direkt über der vereisten Stelle befindet.



NACHBEHANDLUNG:

- Halten Sie die behandelte Stelle sauber.
- Schwimmen und Duschen ist erlaubt.
- Nicht an der behandelten Warze kratzen oder zupfen.
- Falls nötig, schützen Sie diesen mit einem Pflaster und stechen Sie diese keinschmerzlos auf.
- Falls das schmerzhaft, stichende Gefühl anhält oder andere Komplikationen auftreten, konsultieren Sie Ihren Arzt.